



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA

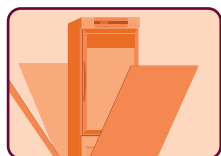


1

Após retirar o equipamento da embalagem de madeira e remover a embalagem de proteção, fazer a limpeza com pano úmido e sabão neutro.

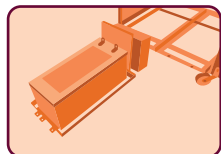

2

Caso a(s) bateria(s) do seu equipamento esteja(m) embalada(s) em separado, realize a instalação conforme as instruções em anexo.

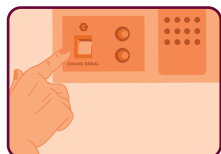

3

Ligar o equipamento na chave geral para certificar-se do funcionamento pelo Sistema de Emergência (deixar funcionando de 20 a 30 minutos).



4

Verificar a voltagem de entrada de energia da rede elétrica (mudar seletora de voltagem se necessário 110 ou 220V).



5

Plugar o equipamento na rede elétrica (equipamento leva 8 minutos para analisar a energia e acionar o compressor).



6

Caso seu equipamento possua discadora, realizar a programação conforme adesivo de instruções na face posterior do equipamento (ou no manual do produto).

7

Caso o seu equipamento possua software, realizar a instalação conforme o manual de instruções que encontra-se disponível para acesso no QR code abaixo.

8

Certificar-se da posição definitiva do equipamento, distância do teto 50 cm, laterais e fundo 10 cm.

9

Após estabilizada a temperatura dê o reset através do display.

10

Deve-se verificar a temperatura diariamente por 7 (sete) dias. Nesse intervalo não acondicionar materiais no equipamento até que haja comprovação de estabilidade de temperatura.

11

DÚVIDAS? Entre em contato com a assistência técnica da Biotecno pelo telefone (55) 99944-3022.

ATENÇÃO: O sistema de alarmes para temperatura alta ou baixa e discador possuem 2 horas de retardo funcional, pois é o tempo necessário para estabilizar a temperatura. Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste equipamento respeita o novo padrão estabelecido pela NBR14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pela portaria nº 02/2007, do Conmetro. Portanto, caso a tomada disponibilizada ao equipamento seja do padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição pelo novo padrão NBR14136, devidamente aterrada.

*Opcionais não interferem no funcionamento do equipamento, porém a instalação dos mesmos é altamente recomendada.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.biotecno.com.br/manuais

O ITEM ABAIXO ASSINALADO CORRESPONDE À VERSÃO DO SEU EQUIPAMENTO. ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR:

- Manual Linha BT-1100 Versão 1
- Manual Linha BT-1100 Versão 2
- Manual Linha BT-1100 Versão 3
- Manual Linha BT-1100 Versão 4
- Manual Linha BT-1100 Versão 5
- Manual Linha BT-1100 Versão DUO
- Manual Linha BT-1200 Versão 1
- Manual Linha BT-1200 Versão 2
- Manual Linha BT-1300
- Manual Linha BT-1500

